

V 1.00

## Présentation

Les glycémies capillaires peuvent être saisies précisément avec MédicElite 9. Il est possible de saisir rapidement les résultats et de procéder aux ajustements à l'aide des protocoles saisis par le médecin.

## Identifier les patients

Depuis le menu « Infirmiers » du patient, affichez la page « Soins techniques ». Le premier onglet vous permet de paramétrer votre patient.

Date	Heure	Valeur	UI	CP
15/01/2020	18:29	1.10		
15/01/2020	07:24	1.06		
14/01/2020	17:20	1.44		
14/01/2020	12:00	1.35		
14/01/2020	07:15	1.37		
13/01/2020	12:00	1.69		
13/01/2020	11:30	1.69		
13/01/2020	08:11	0.74		
12/01/2020	18:17	1.30		
12/01/2020	12:15	1.21		
12/01/2020	07:25	0.88		
11/01/2020	18:23	1.71		
11/01/2020	12:14	1.89		
11/01/2020	07:00	1.35		

Si vous voulez suivre sa glycémie, cochez « Suivre la glycémie capillaire »

Indiquez ensuite le produit utilisé pour l'insuline rapide injectée (attention, l'insuline lente est donnée classiquement dans les traitements)

Saisissez également le nom de l'antidiabétique oral d'ajustement éventuellement utilisé (metformine, Sulfamides..)

Les protocoles peuvent être saisis et suivis par les médecins. Il est important de dater les protocoles afin de garder une trace de l'historique des modifications faites par le passé.

## Saisie des glycémies

La saisie des glycémies peut s'effectuer de différentes manières :

Classiquement depuis la saisie des paramètres (onglet infirmiers/paramètres)



Ou plus rapidement depuis le menu principal du logiciel en cliquant sur le bouton « Glycémie capillaire » situé en bas de la fenêtre.

Glycémie capillaire

✕ ✓ +

◀ mardi 23 juin 2020 ▶

Résident	Historique
BRUNETTE Anne	
BRUNOUIL Noémie	
BIEVENU Estime	
BRANDONNE Ebone	
BRUSCHI Alice	

La liste des patients qui ont été cochés « suivi de glycémie » sont affichés.

Pour chacun, l'historique des glycémies de la journée est affichée. Pour chacune, l'heure, la valeur ainsi que les ajustements effectués.

Pour saisir une nouvelle valeur, placez le curseur sur le résident désiré et cliquez sur le bouton ajout

Saisissez alors l'heure, la valeur de la glycémie (entre 0.4 et 5). (S'il y a plus de 5, saisissez 5)

Et éventuellement les UI d'insuline rapide et le nombre de comprimés d'antidiabétique oraux donnés.

Le dernier protocole est affiché

Saisie glycémie

Date : 23/06/2020

Heure : 11:51

Valeur glycémie : 1

Normalité : 0.7 à 1 -  
Plage saisie : 0.4 à 5

**Ajustement effectué**

Insuline rapide injectée : 0  
*Novorapid*

Antidiabétique oral donné : 0

Dernier protocole


Ok Annuler

## Evolution

Depuis l'onglet « soins techniques » il est possible d'afficher la liste des dernières glycémies depuis 7 jours (ou plus longtemps)

Le bouton « Evolution » fait apparaître sur la période désirée trois graphiques :

- L'historique des glycémies le matin (avant 10h)
- L'historique des glycémies du midi
- L'historique des glycémies du soir

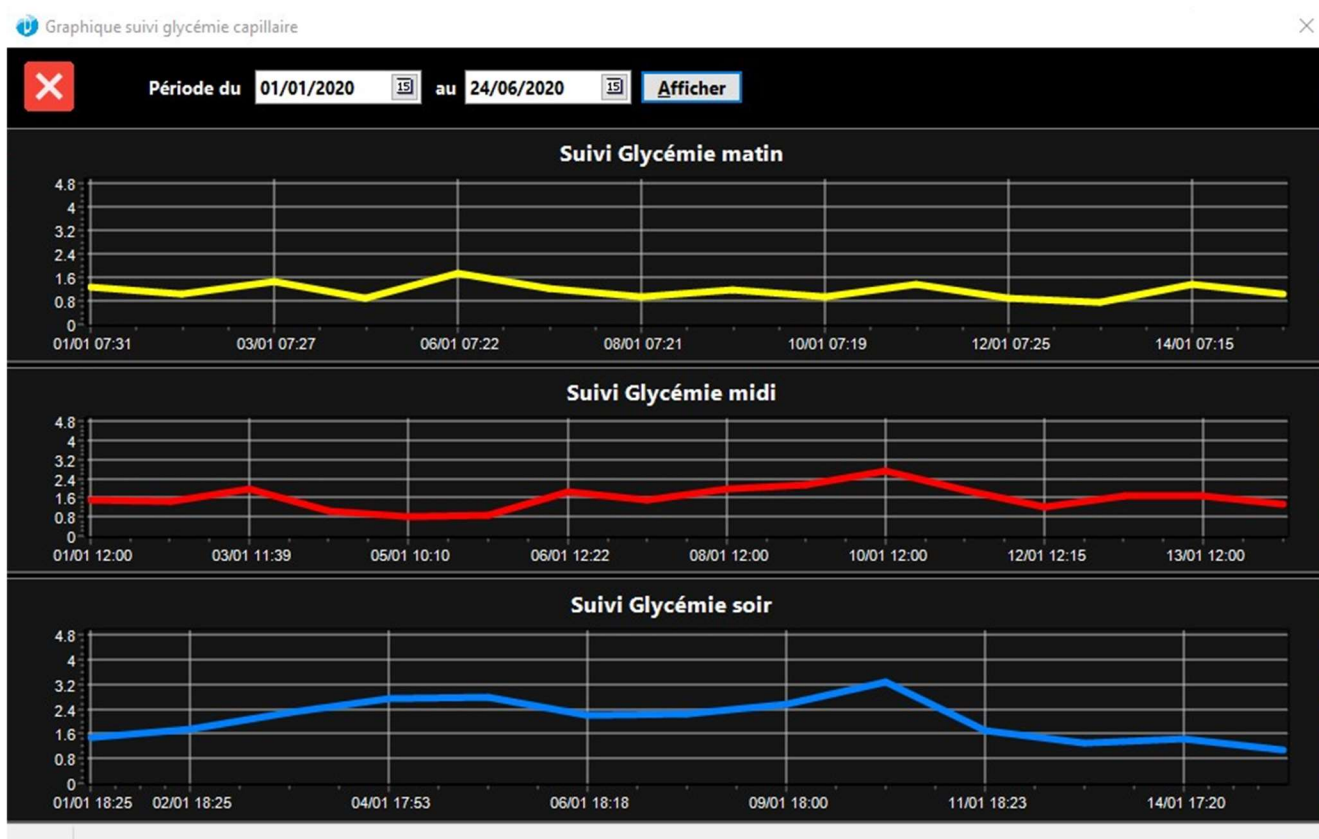

Ainsi, pour doser correctement un patient, on peut observer les éventuels écarts sur les trois périodes de la journée